



SPETTROMETRO DI MASSA QUADRUPOLE

BELMASS II

[microtrac.com/it/prodotti/analisi-dell-adsorbimento-dei-gas/
valutazione-del-catalizzatore/belmass-ii/](https://microtrac.com/it/prodotti/analisi-dell-adsorbimento-dei-gas/valutazione-del-catalizzatore/belmass-ii/)

BELMASS II**SPETTROMETRO DI MASSA QUADRUPOLE**

La spettrometria di massa (MS) è una tecnica analitica utilizzata per determinare i costituenti molecolari di gas puri o misti, vapori, liquidi e persino solidi. Bombardando il campione con un fascio di elettroni, gli ioni vengono generati e separati in base al loro rapporto massa/carica. Lo spettro di massa risultante è un grafico dell'intensità in funzione del rapporto massa/carica.

BELMASS II è uno spettrometro di massa quadrupolare (QMS), un analizzatore di massa unico utilizzato nella spettrometria di massa. Come quadrupolo, è composto da quattro aste cilindriche disposte parallelamente l'una all'altra. Applicando un campo elettrico oscillante alle aste, gli ioni vengono separati in base alla stabilità delle loro traiettorie in funzione del loro rapporto massa/carica (m/z). Un moltiplicatore di elettroni rileva gli ioni devianti.

BELMASS II può essere combinato con diversi strumenti. Soprattutto in combinazione con un BELCAT II può fornire importanti informazioni sulle specie dei gas desorbiti da miscele di gas/vapori e sulle loro curve di rottura.

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**


- | Spettrometro di massa a quadrupolo da banco
- | Il tubo riscaldato permette l'analisi dei vapori
- | Strumento con spettrometro di massa incorporato e pompa a vuoto

BELMASS II

PANORAMICA

Il rivelatore di massa è riconosciuto come il rivelatore più efficiente per l'analisi qualitativa. Tuttavia, è difficile ottenere un buon risultato quantitativo perché analizza solo una piccola quantità di gas.

Selezionando i materiali e i componenti più adatti, Microtrac ha sviluppato con successo lo spettrometro di massa BELMASS II con un'elevata capacità quantitativa. Anche il gas ammoniaca può essere analizzato utilizzando un tubo riscaldato e una pompa a membrana a secco.

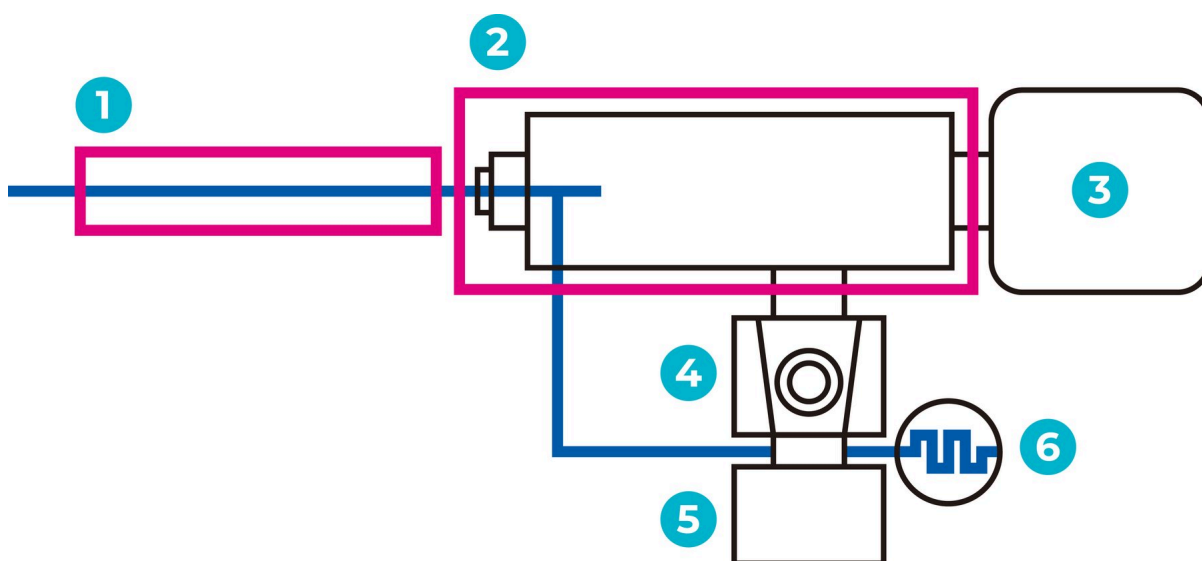

1 | Sonda Sniffer

3 | Analizzatore di massa

5 | Pompa a diaframma

2 | Tubo flessibile di calore


4 | Pompa turbomolecolare

6 | Misuratore di vuoto

BELMASS II


SOFTWARE DI MISURAZIONE

Con il software di BELCAT II, l'intensità di corrente dei singoli componenti viene misurata continuamente, mentre l'inizio e la fine della misurazione possono essere impostati entro un determinato intervallo di tempo tramite timer. Per l'asse verticale sono disponibili scale lineari, logaritmiche e automatiche. Dati esterni, come la temperatura, possono essere importati tramite l'ingresso del segnale analogico, fornendo ancora più dettagli. Per una valutazione completa della reazione catalitica, lo spettrometro di massa BELMASS II può essere collegato a un Analizzatore di catalizzatori della serie BELCAT.

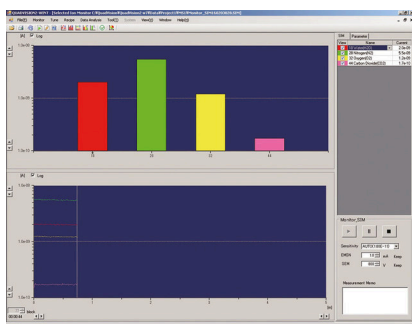

MONITORAGGIO DEGLI IONI SELEZIONATI

- Possono essere selezionati fino a 16 numeri di massa e la corrente ionica può essere monitorata in time lapse
- Questa modalità è utile quando i tipi di gas di reazione sono noti.

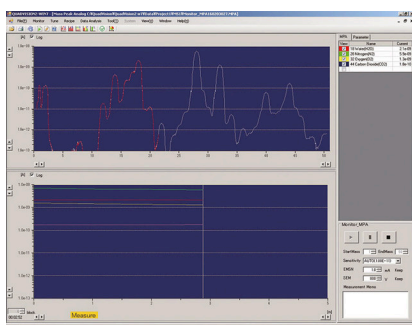

MONITORAGGIO DEI PICCHI DI MASSA

- Il controller dei picchi di massa scansiona continuamente l'intervallo di numeri di massa impostato e visualizza gli spettri.
- Questa modalità è utile quando i tipi di gas di reazione sono sconosciuti.

Status Check	
ROM Type	M-201QA-TDM
ROM Version	1.17
Serial No.	ED14Y262
Status	Normal
SEM Power Supply	O
Ion Source	B-A type
Electrometer	RGA SEM
Ion Source Heater	
QPV Variable	
EE operation	8bit
Filament	Y203
Pulse Count Type EM	
Energy filter	
IS Board for Negative Ion	

CONTROLLO DELLO STATO

- Funzione autodiagnostica
- Facile manutenzione


BELMASS II

SOFTWARE DI ANALISI

Lo spettro di massa ottenuto può essere analizzato con il software ChemMaster II di Microtrac. Le caratteristiche principali di questo software di facile utilizzo sono:


- lo spettro può essere elaborato e l'area calcolata
- funzioni utili, come "correzione della linea di base", "filtro del rumore di picco", ecc. permettono un calcolo accurato della quantità di chemisorbimento
- "Adattamento della distribuzione", una sofisticata funzione di deconvoluzione dei picchi, può dividere lo spettro misurato in più picchi in modo da poter determinare il numero di siti attivi presenti sulla superficie del catalizzatore
- lo spettro della misura dell'impulso può anche essere analizzato

La quantità di chemisorbimento, il tasso di dispersione del metallo e altre proprietà possono essere calcolati automaticamente.

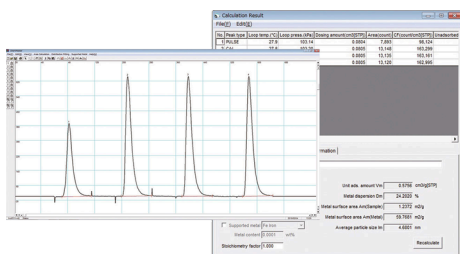


CALCOLO DELL'AREA

Lo spettro può essere elaborato e l'area calcolata.

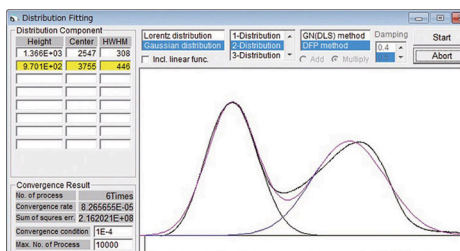

ADATTAMENTO DELLA DISTRIBUZIONE

Una sofisticata funzione di deconvoluzione dei picchi.

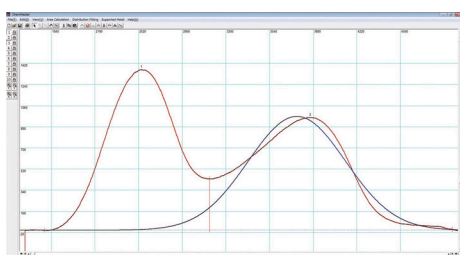

DECONVOLUZIONE DEI PICCHI

Lo spettro misurato può essere diviso in più picchi.


BELMASS II

ESEMPI DI MISURAZIONE

La combinazione dello spettrometro di massa BELMASS II con la serie BELCAT rende possibile una valutazione più dettagliata della reazione catalitica (TPReaction). BELMASS II può registrare la temperatura del campione ed è adatto all'analisi termica.




BELMASS II E BELCAT II COMBINATI

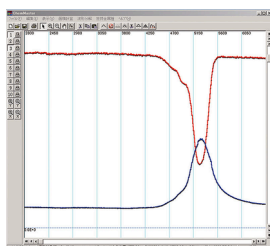

MISURAZIONE TPR SU CUO

Il consumo di idrogeno e la produzione di acqua possono essere osservati allo stesso tempo.

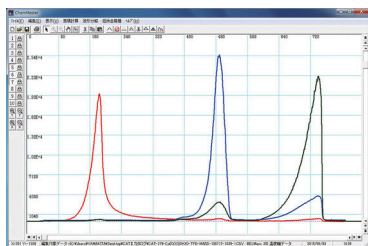

DECOMPOSIZIONE TERMICA DELL'OSSALATO DI CALCIO

Riscaldando il campione, $m/z=18,28,44$ possono essere rilevati.

BELMASS II

APPLICAZIONI TIPICHE



chimici



materiali per batterie



ceramica

Per trovare la soluzione migliore per le vostre esigenze sulla caratterizzazione granulometrica, visitate il nostro database applicativo.

DATABASE APPLICATIVO → microtrac.com/it/applicazioni/database-applicativo/

BELMASS II

DATI TECNICI

Maximum range	m/z = 1 ~ 200
Filament material	Yttria-coated iridium
Rilevatore	Faraday cup / SEM
Risoluzione	M/ΔM ≥ 2M
Sniffing section	Capillary tubes Standard-specification is made of SUS Option-specification is made of PEEK
Capillary tube dimensions	OD = 1/16 inch; ID = 0.1 mm; L = 1.5 m
Hot hose length	1 m
Maximum heating temperature of hot hose	200°C (SUS) 120°C (PEEK)
Gas introduction method	Scarico differenziale
Amount of gas introduced	0.6 cc / min (at 1 atm)
Gas inlet pressure	Atmospheric pressure
Exhaust port fitting	1/4 inch one-touch joint
Communication Interface	RS-232C (straight)
Dimensioni (L x A x P)	280 × 400 × 600 mm (excluding capillary tube)
Ingresso segnale analogico	DC0 to 10V (10 bit, 1 ch)
Peso	36 kg
Power supply: Rated voltage	Single-phase: 100-120V (Indication 115V) AC: 200-240V (Indication 230V)
Power supply: Power frequency	50 / 60 Hz
Power supply: Power consumption	600 VA
Power supply: Electric shock protection class	Class I
Standard	CE, UKCA
Selected Ion Monitor	Max. 16 ch
Installation environment: Temperature	10°C to 35°C
Installation environment: Humidity	20%RH to 80%RH (no condensation)
Installation environment: Elevation	2000 m or less
Installation environment: Installation category	Category II
Installation environment: Pollution degree	2 (for indoor use)

BELMASS II

CONTATTACI →

microtrac.com/it/contact-services/general-request/?prefilltext=contact_form.request&product=624

RICHIEDI QUOTAZIONE →

microtrac.com/it/contact-services/quote-request-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=624



MICROTRAC
a **VERDER** company

[microtrac.com/it/prodotti/analisi-dell-adsorbimento-dei-gas/
valutazione-del-catalizzatore/belmass-ii/](https://microtrac.com/it/prodotti/analisi-dell-adsorbimento-dei-gas/valutazione-del-catalizzatore/belmass-ii/)

© Microtrac – microtrac.com / I contenuti possono essere soggetti a modifiche o correzioni