



КВАДРУПОЛЬНЫЙ МАСС-СПЕКТРОМЕТР

BELMASS II

microtrac.com/ru/products/gas-adsorption-measurement/catalyst-evaluation/belmass-ii/

BELMASS II

КВАДРУПОЛЬНЫЙ МАСС-СПЕКТРОМЕТР

Масс-спектрометрия (МС) — это аналитический метод определения молекулярных составляющих чистых или смешанных газов, паров, жидкостей и даже твердых веществ. Бомбардируя образец электронным пучком, ионы генерируются и разделяются в соответствии с их отношением массы к заряду. Полученный спектр масс представляет собой график интенсивности в зависимости от отношения массы к заряду.

BELMASS II — это квадрупольный масс-спектрометр (QMS), один из видов масс-анализатора, используемый в масс-спектрометрии. Как квадруполь, он состоит из четырех цилиндрических стержней, расположенных параллельно друг другу. Применяя к стержням колебательное электрическое поле, ионы разделяются на основе стабильности их траекторий в зависимости от их отношения массы к заряду (m/z). Электронный умножитель обнаруживает отклоненные ионы.

BELMASS II можно комбинировать с различными инструментами. Особенно в сочетании с BELCAT II он может предоставить важную информацию о видах десорбированных газов из газовой-паровых смесей и их кривых прорыва.



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Настольный квадрупольный масс-спектрометр
- Прибор со встроенной масс-спектрометрией и вакуумным насосом


- Патрубок нагрева позволяет анализировать пары

BELMASS II

ОБЗОР

Детектор массы признан наиболее эффективным детектором для качественного анализа. Однако трудно получить хороший количественный результат, поскольку он анализирует только небольшое количество газа.

Выбрав наиболее подходящие материалы и компоненты, Microtrac успешно разработала BELMASS II с высокой количественной производительностью. Даже газообразный аммиак может быть проанализирован с помощью патрубка нагрева и сухого мембранного насоса.

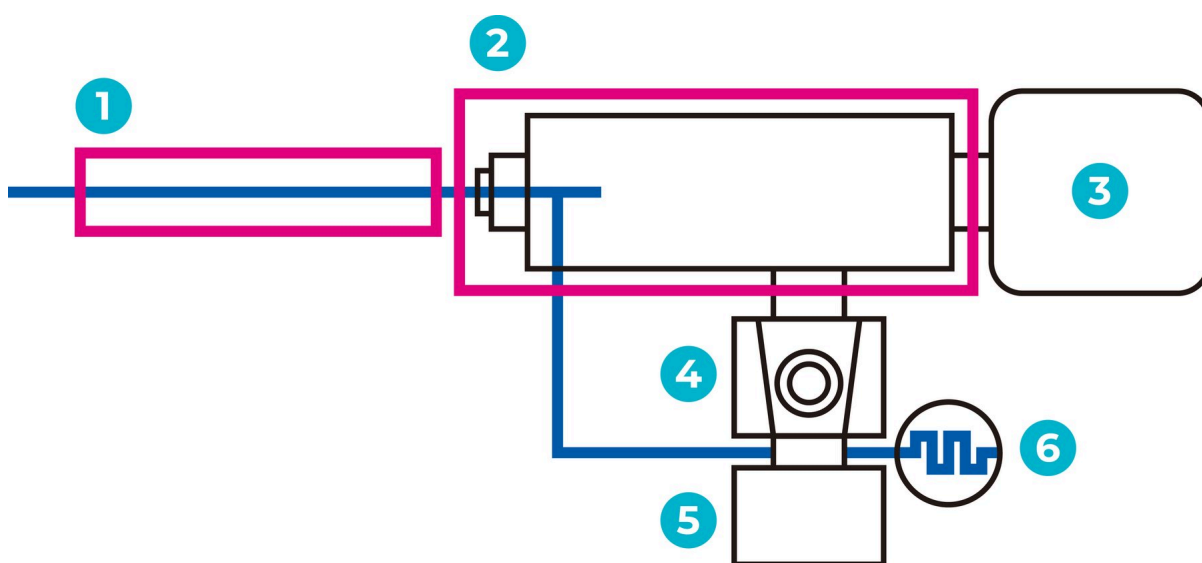

1 | Детекторный зонд

3 | Масс-анализатор

5 | Мембранный насос

2 | Патрубок нагрева


4 | Турбомолекулярный насос

6 | Вакуумметр

BELMASS II


ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ

С помощью измерительного программного обеспечения BELCAT II сила тока отдельных компонентов измеряется непрерывно, а начало и конец измерения можно установить в пределах определенного временного диапазона с помощью таймера. Для вертикальной оси доступны линейное, логарифмическое и автоматическое масштабирование. Чтобы сделать ваш рабочий процесс более гибким, внешние данные, такие как температура, могут быть импортированы через вход аналогового сигнала, а для детальной оценки каталитической реакции также возможно соединение с анализатором катализаторов серии BELCAT.

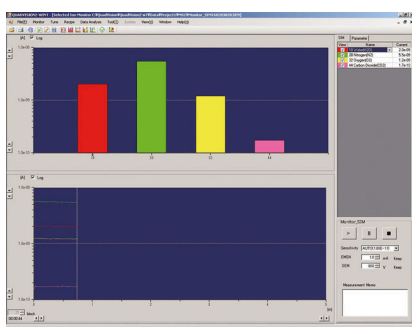

ВЫБРАННЫЙ МОНИТОРИНГ ИОНОВ

- Можно выбрать до 16 массовых чисел, а ионный ток можно отслеживать с течением времени
- Этот режим полезен, когда известны типы реакционных газов.

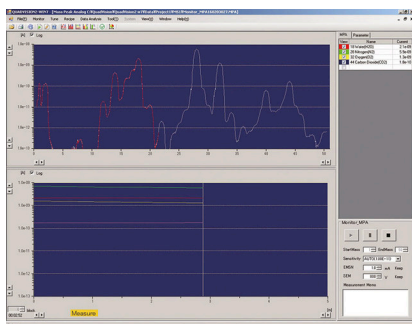

МОНИТОРИНГ ПИКА МАССЫ

- Монитор пика массы непрерывно сканирует установленный диапазон массовых чисел и отображает спектры.
- Этот режим полезен, когда типы реакционных газов неизвестны.

Status Check	
ROM Type	M-201QA-TDM
ROM Version	1.17
Serial No.	ED14Y262
Status	Normal
SEM Power Supply	O
Ion Source	B-A type
Electrometer	RGA SEM
Ion Source Heater	
QPV Variable	
EE operation	8bit
Filament	Y203
Pulse Count Type EM	
Energy filter	
IS Board for Negative Ion	

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ

- Функция самодиагностики
- Простота обслуживания


BELMASS II

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА


Полученный масс-спектр может быть проанализирован с помощью оригинального программного обеспечения для анализа Microtrac «Chemmaster II».

- В этой программе можно обработать спектр и рассчитать площадь.
- Полезные функции, такие как «коррекция фоновой линии», «фильтр пиковых шумов» и т. д., позволяют точно рассчитать количество хемосорбции.
- «Коррекция распределения», сложная функция деконволюции пиков, может разделить измеренный спектр на несколько пиков, чтобы можно было определить количество активных центров, присутствующих на поверхности катализатора.
- Спектр измерения импульса также может быть проанализирован.


Количество хемосорбции, скорость диспергирования металла и другие свойства могут быть рассчитаны автоматически.

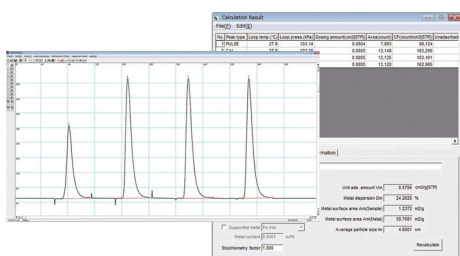

РАСЧЕТ ПЛОЩАДИ

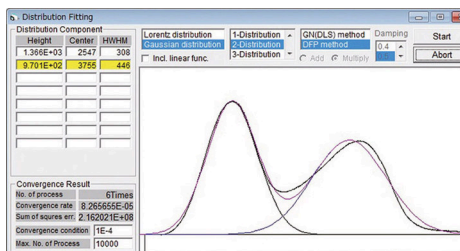

КОРРЕКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

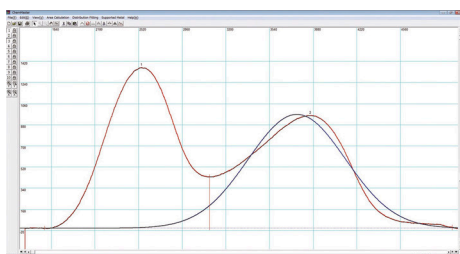

ПИКОВАЯ ДЕКОНВОЛЮЦИЯ


BELMASS II

ПРИМЕРЫ ИЗМЕРЕНИЙ

Комбинация BELMASS II с серией BELCAT позволяет более детально оценить каталитическую реакцию (TPReaction). BELMASS II может записывать температуру образца. Подходит для термического анализа.




BELMASS II И BELCAT II ВМЕСТЕ ВЗЯТЫЕ

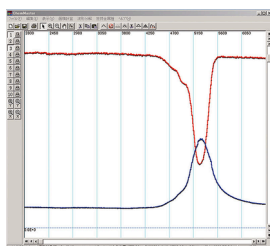

ИЗМЕРЕНИЕ TPR НА CUO

Потребление водорода и отбор воды можно наблюдать одновременно.

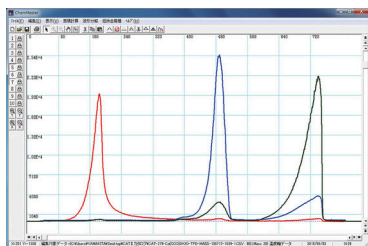

ТЕРМИЧЕСКОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ ОКСАЛАТА КАЛЬЦИЯ

Нагревая образец, можно обнаружить $m/z=18, 28, 44$.

BELMASS II

ТИПИЧНЫЕ ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



химикаты



материалы аккумуляторов



керамика

Чтобы найти лучшее решение для вашего применения в определении размера частиц, посетите нашу базу данных применений.

БАЗА ДАННЫХ ПО ПРИМЕНЕНИЮ → microtrac.com/ru/applications/application-database/

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Maximum range	m/z = 1 ~ 200
Filament material	Yttria-coated iridium
Детектор	Faraday cup / SEM
Разрешение	M/ΔM≥2M
Sniffing section	Capillary tubes Standard-specification is made of SUS Option-specification is made of PEEK
Capillary tube dimensions	OD = 1/16 inch; ID = 0.1 mm; L = 1.5 m
Hot hose length	1 m
Maximum heating temperature of hot hose	200°C (SUS) 120°C (PEEK)
Gas introduction method	Выход газов
Amount of gas introduced	0.6 cc / min (at 1 atm)
Gas inlet pressure	Atmospheric pressure
Exhaust port fitting	1/4 inch one-touch joint
Communication Interface	RS-232C (straight)
Размеры (Ш x В x Г)	280 × 400 × 600 mm (excluding capillary tube)
Вход аналогового сигнала	DC0 to 10V (10 bit, 1 ch)
Вес	36кг
Power supply: Rated voltage	Single-phase: 100-120V (Indication 115V) AC: 200-240V (Indication 230V)
Power supply: Power frequency	50 / 60 Hz
Power supply: Power consumption	600 VA
Power supply: Electric shock protection class	Class I
Standard	CE, UKCA
Selected Ion Monitor	Max. 16 ch
Installation environment: Temperature	10°C to 35°C
Installation environment: Humidity	20%RH to 80%RH (no condensation)
Installation environment: Elevation	2000 m or less
Installation environment: Installation category	Category II
Installation environment: Pollution degree	2 (for indoor use)

BELMASS II

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ →

microtrac.com/ru/contact/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=624

ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЯ →

[microtrac.com/ru/contact-services/quote-request-form/?
prefilltext=contact_form.quote_request&product=624](https://microtrac.com/ru/contact-services/quote-request-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=624)



MICROTRAC
a **VERDER** company

microtrac.com/ru/products/gas-adsorption-measurement/catalyst-evaluation/belmass-ii/

© Microtrac – microtrac.com / Содержание может быть изменено или исправлено