



GAS PYCNOMETER

BELPYCNO L

microtrac.com/nl/producten/gas-adsorptie-meting/density-measurement/belpycno-l/

BELPYCNO L**GAS PYCNOMETER**

BELPYCNO L is een volledig automatische gaspycnometer voor het bepalen van het volume en de skeletdichtheid van poeders, granulaten, poreuze materialen, mengsels, pasta's en vloeistoffen. De combinatie van een interne temperatuurregeling en een absolute druktransducer compenseert eventuele invloeden van omgevingstemperatuur en drukschommelingen.

De pycnometer vervangt de klassieke methode van vloeistofverplaatsing door gebruik te maken van een sondeergas zoals helium dat zelfs de kleinste poriën kan bereiken met een diameter van minder dan één nanometer. Zo kan de dichtheid van poeders en poreuze materialen exact worden bepaald.

De gaspycnometer werkt als een op zichzelf staand instrument of door hem op een computer aan te sluiten. De meegeleverde software is eenvoudig te gebruiken en biedt volledige controle en een breed gamma aan functies, van het programmeren van de computer tot het rapporteren en opslaan van analytische gegevens en resultaten. Bovendien worden het berekende volume en de dichtheid in situ weergegeven voor elke meetstap.

**BELPYCNO L****BELANGRIJKSTE KENMERKEN**

- | Ingebouwde gelineariseerde druk transducer
- | Monster cel en referentievolumes zijn afgescheiden van de electronica
- | Ingebouwde accurate ATC (Automatische Temperatuur Controle)
- | Korte meetduur en snelle systeem stabilisatie
- | Ongeëvenaarde reproduceerbaarheid van resultaten

BELPYCNO L

ACCURATE DICHTHEID BEPALING VOOR DIVERSE TOEPASSINGEN


De BELPYCNO L pycnometer is uitgerust met maximaal 3 referentiekamervolumes (20, 40 en 60 cm³) om de beste prestaties te leveren in combinatie met de gekozen monsterkamer (4, 20, 40, 60, 112 en 150 cm³). Onafhankelijk van de omgevingstemperatuur en drukvariaties, maakt de BELPYCNO L metingen mogelijk die niet beperkt zijn door tijdrovende kalibratieprocedures.

Eenmaal gekalibreerd voert de pycnometer de analyse zonder problemen uit. Geen contaminatie risico's door gasbelading van referentiekamer (hoge druk) naar monsterkamer (lage druk), ondersteund door programmeerbare afvoerbepierking en eenvoudig gebruik van papieren filters. Variabele laaddruk maakt analyse van schuimen en samendrukbare monsters mogelijk.

De BELPYCNO L pycnometer is geschikt voor de dichtheidsanalyse in diverse toepassingen: poeders, hout, bouwmaterialen, Katalysatoren, vloeistoffen en pasta's, actieve koolstof, voedsel, farmaceutica, ... en vele andere!



houtsnippen

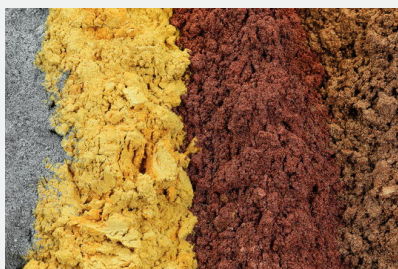

poeders



keramiek

Om de beste oplossing te vinden voor uw deeltjes-karakterisatie behoeften, kunt u onze toepassingsdatabase consulteren.

TOEPASSINGSDATABASE → microtrac.com/nl/toepassingen/toepassingsdatabase/

BELPYCNO L**TECHNISCHE GEGEVENS**

Reference chamber volumes	Ongeveer 20, 40 en 60 cm ³
Sample chamber volumes	Ongeveer 4, 20, 40, 60, 100 en 150 cm ³
Probe gas	Helium (other inert gases possible)
Controle	Integrated micro processor
Keyboard	Alphanumeric foil
Display	4-line 40 characters LCD-display with back light
Pre-treatment	Flow, programmable purge cycles optional with vacuum preparation
Temperature	14° C to 40° C (optional 60° C with external oven) resolution: ± 0.01° C
Pressure transducer	0.001 kPa displayed resolution
AD-Converter	19 Bit
Accuracy	0.01%
Reproducibility	0.01%
Vacuum connector	KF-10
Interfaces	2 x serial (ext. balance, PC-data transfer) 1x parallel (printer)
Sensor (optional)	Vochtigheid

BELPYCNO L**DOWNLOADS****BELPYCNO L →**

microtrac.com/files/92794/belpycno-l.pdf · Engels

PRODUCTINFORMATIEBLAD BELPYCNO L →

microtrac.com/files/452691/productinformatieblad-belpycno-l.pdf · Nederlands

BELPYCNO L

CONTACTEER ONS

microtrac.com/nl/contact-services/general-request/?prefilltext=contact_form.request&product=623

OFFERTE-AANVRAAG

microtrac.com/nl/contact-services/quote-request-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=623



MICROTRAC
a VERDER company

microtrac.com/nl/producten/gas-adsorptie-meting/density-measurement/belpycno-l/