



PICNÓMETRO DE GAS

BELPYCNO L

microtrac.com/es/productos/medicion-por-adsorcion-de-gas/densitometria/belpycno-l/

BELPYCNO L

PICNÓMETRO DE GAS

El BELPYCNO L es un picnómetro de gases para la determinación del volumen y de la densidad esquelética en polvos, granulados, materiales porosos, mezclas, pastas y líquidos. En este se ha combinado un control de temperatura interno con un transductor de presión absoluta para compensar cualquier influencia de la temperatura ambiente y fluctuaciones en la presión.

El picnómetro de gases reemplaza el método clásico de desplazamiento de líquidos al utilizar como medio de desplazamiento gases tales como el helio, que puede alcanzar incluso aquellos poros más pequeños con un diámetro inferior a 1 nm. Esto permite determinar de forma exacta la densidad de polvos y materiales porosos.

El picnómetro de gases puede operar como instrumento autónomo o conectado a un ordenador. Este se suministra con un software fácil de usar que ofrece control completo y una amplia gama de funciones que abarcan la programación desde el ordenador, creación de informes y almacenamiento de resultados y datos analíticos. El software muestra igualmente «in situ» el volumen calculado y la densidad en cada paso de la medición.

**BELPYCNO L**

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Transductor lineal integrado para la presión absoluta
- Control automático de temperatura (ATC) exacto integrado
- Reproducibilidad inigualable de resultados
- Celda para la muestra y volúmenes de referencia separados de la electrónica
- Tiempo corto de medición y estabilización rápida del sistema

BELPYCNO L

DETERMINACIÓN EXACTA DE LA DENSIDAD PARA NUMEROSAS APLICACIONES


El picnómetro de gases BELPYCNO L está equipado con hasta 3 volúmenes de referencia (20, 40 y 60 cm³) lo que le permite ofrecer el mejor rendimiento en combinación con la celda de la muestra seleccionada (4, 20, 40, 60, 112 y 150 cm³). Al trabajar independientemente de la temperatura ambiente y de las variaciones de presión, la medición de la densidad no se ve limitada por procedimientos de calibración que consumen tiempo.

Una vez calibrado, el picnómetro de gases ejecuta el análisis sin ningún tipo de preocupación para el usuario. La carga del gas se realiza desde la cámara de referencia (alta presión) hacia la cámara de la muestra, y está asistida por una función de restricción de descarga programable y el uso fácil de filtros de papel, lo que elimina todo riesgo de contaminación. La presión de carga variable hace posible el análisis de espumas y muestras compresibles.

El picnómetro de gases BELPYCNO L puede emplearse para medir la densidad de una gran variedad de materiales: polvos, madera, Materiales de construcción, Catalizadores, líquidos y pastas, Carbón activado, alimentos, Productos farmacéuticos, ...y muchos otros.



Astillas de madera

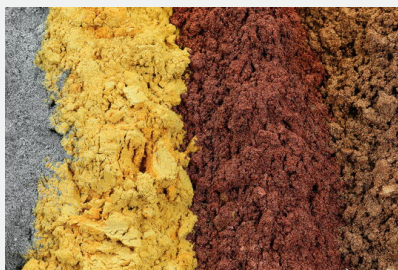

polvos



cerámica

Para encontrar la mejor solución para sus necesidades de caracterización de partículas, visite nuestra base de datos de aplicaciones.

BASE DE DATOS DE APLICACIONES → microtrac.com/es/aplicaciones/base-de-datos-con-aplicaciones/

BELPYCNO L

DATOS TÉCNICOS

Volúmenes de la cámara de referencia	Aprox. 20, 40 y 60 cm ³
Volúmenes de la cámara de muestras	Aprox. 4, 20, 40, 60, 100 y 150 cm ³
Gas de la sonda	Helio (posibilidad de otros gases inertes)
Control	Microprocesador integrado
Teclado	alfanumérico de lámina
Pantalla	Pantalla LCD de 4 líneas y 40 caracteres con retroiluminación
Pretratamiento	Ciclos opcionales de purga de flujo programables con preparación de vacío
Temperatura	14° C a 40° C (opcional 60° C con horno externo) resolución: ± 0,01° C
Transductor de presión	0,001 kPa resolución mostrada
Convertidor AD	19 Bit
Precisión	0.01%
Reproducibilidad	0.01%
Conector de vacío	KF-10
Interfaces	2 x serie (balanza externa, transferencia de datos al PC) 1x paralelo (impresora)
Sensor (opcional)	Humedad

BELPYCNO L

DESCARGAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO →

microtrac.com/files/187570/descripcion-del-producto.pdf

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO BELPYCNO L →

microtrac.com/files/452386/hoja-de-datos-del-producto-belpycno-l.pdf

BELPYCNO L

CONTACTO

microtrac.com/es/contact-services/general-request/?prefilltext=contact_form.request&product=623

PEDIR UN PRESUPUESTO

microtrac.com/es/contact-services/quote-request-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=623



MICROTRAC
a VERDER company

microtrac.com/es/productos/medicion-por-adsorcion-de-gas/densitometria/belpycno-l/