


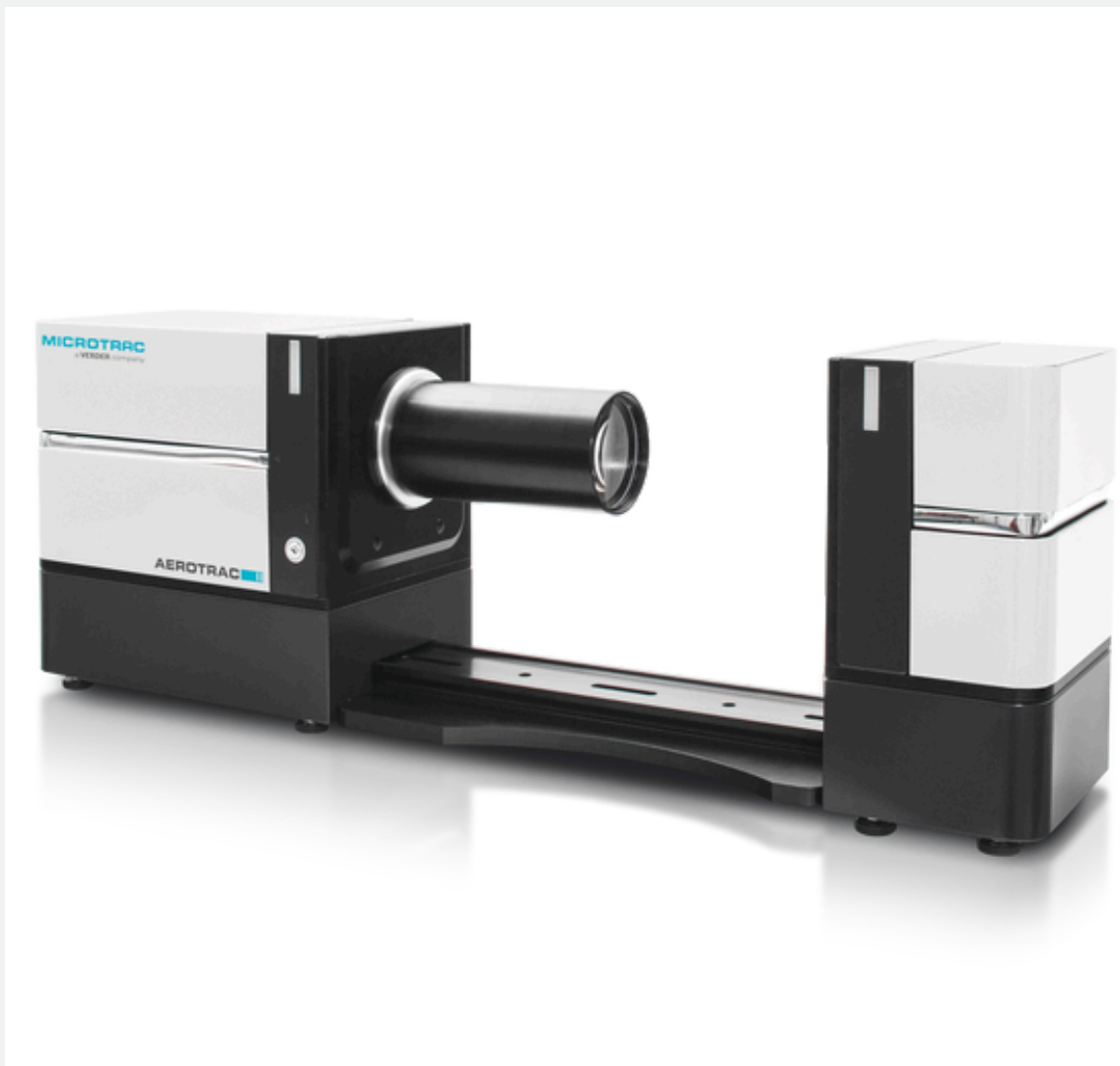

ANALYSEUR DE TAILLE DE PARTICULES & DE GOUTTELETTES DE PULVÉRISATION

AEROTRAC II

microtrac.com/fr/produits/analyse-taille-forme-particules/diffraction-laser/aerotrac-ii/

AEROTRAC II

ANALYSEUR DE TAILLE DE PARTICULES & DE GOUTTELETTES DE PULVÉRISATION

L'AEROTRAC II est un analyseur pour la mesure de la distribution granulométrique de particules en suspension dans l'air.

Les domaines d'utilisation sont l'analyse de la distribution granulométrique et de la concentration (calculée à partir de la lumière laser transmise) de particules en suspension dans l'air, comme par ex. des gouttelettes finement « atomisées », des poudres, particules d'aérosols, brumes, etc.



Aerotrak II


AEROTRAC II

AVANTAGES PRODUIT

- | Vaste gamme d'applications
- | Différents modes de mesure pour une grande variété d'applications
- | Key Start (commande manuelle par clavier)
- | Auto Start (démarrage automatique dès que la lumière diffusée par la matière échantillon est détectée)
- | Lancement de la mesure par l'entrée de signal externe
- | Analyse précise des particules à env. 0,02 milliseconde près, avec de brefs intervalles de mesure
- | Équipé par défaut d'un logiciel pour la correction de la diffusion
- | Peu encombrant
- | Équipé d'un laser à semi-conducteur


EXEMPLES DE MESURES

ANALYSE DE LA VARIATION TEMPORELLE D'UN BROUILLARD DE PULVÉRISÉ

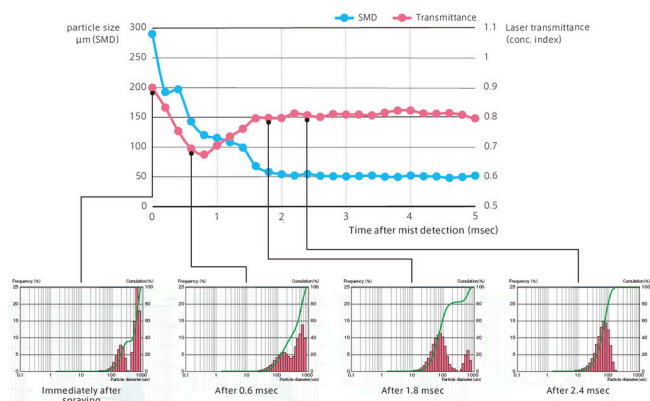

AEROTRAC II

ACCESSOIRES ET OPTIONS

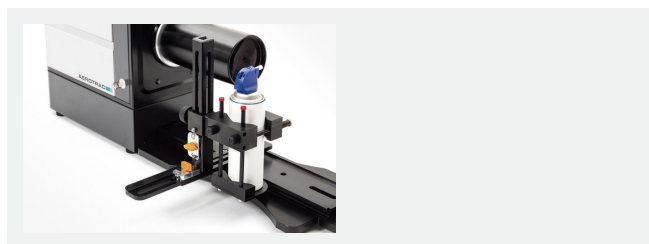

Dispositifs de fixation pour différents types d'aérosols



Mesure en voie humide moyennant une cuve en verre

AEROTRAC II

APPLICATIONS TYPIQUES


L'AEROTRAC II peut être utilisé dans une grande variété de domaines, y compris les gouttelettes d'injecteurs, de nébuliseurs, d'insecticides, de lotions, d'humidificateurs, de séparateurs de brouillard, de peinture en poudre et de diverses poudres.



pigments



lotions

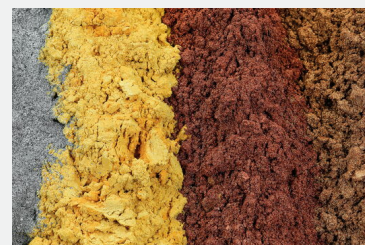

poudres

Pour trouver la meilleure solution à vos besoins de caractérisation des particules, visitez notre base de données d'applications.

AEROTRAC II

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Principe de mesure	Diffraction laser
Plage de mesure	Objectif F100: 0.5 à 350 µm Objectif F300: 1.4 à 1000 µm Objectif F600: 2.8 à 2000 µm
Source lumineuse	Laser à semi-conducteur Longueur d'onde : 635 nm Sortie : 3.5 mW Classe laser : CLASSE 3R
Détecteur	Détecteur annulaire à 32 éléments (avec fonction d'ajustement automatique de l'axe optique)
Temps de mesure	Mesure de la pulvérisation : 0,02 à 500 msec Mesure continue : 1 à 600 sec
Nombre de mesures	Mesure par pulvérisation : 1 à 100 fois Mesure continue : 1 à 9 999 fois
Données	Distribution de la taille des particules (fréquence/cumulation), données récapitulatives (D50% taille des particules, SMD, diamètre de mode etc.) indice de densité
Sample Cell	Matériau : Verre Tempax (avec revêtement) Capacité : 5 à 7 ml
Conditions ambiantes	Température ambiante : 10 à 35 °C Humidité ambiante : 20 à 80% H.R. (sans condensation)
Alimentation électrique	85 à 264 VAC, 47 à 63 hz
Dimensions (L x H x P)	Module d'émission de lumière : 170 × 230 × 240 mm Module de détection : 595 × 230 × 240 mm Pour les modules connectés (option) : 1000 × 230 × 340 mm, 27 kg
Poids	Module d'émission de lumière : 5,5 kg Module de détection : 11,5 kg (avec lentille F300) Pour les modules connectés (option) : 27 kg
Module en opération	PC Windows (inclus PC portable)

AEROTRAC II

NOUS CONTACTER


microtrac.com/fr/contact-services/general-request/

DEMANDE DE DEVIS

microtrac.com/fr/contact-services/quote-request-form/

BASE DE DONNÉES D'APPLICATIONS

microtrac.com/fr/applications/base-de-donnees-applications/

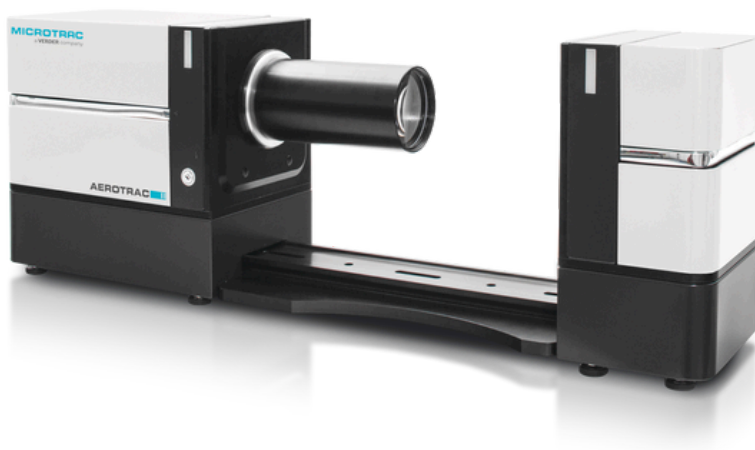

MICROTRAC
a **VERDER** company

microtrac.com/fr/produits/analyse-taille-forme-particules/diffraction-laser/aerotrac-ii/

© Microtrac – microtrac.com / Content may be subject to modifications or corrections