MICROTRAC
a VERDER company



BET SPECIFIC SURFACE AREA & PORE SIZE ANALYZER

BELSORP MAX G

microtrac.com/hu/termekek/gas-adsorption-measurement/surface-area-pore-size-distribution/belsorp-max-g/

BELSORP MAX G

BET SPECIFIC SURFACE AREA & PORE SIZE ANALYZER

Quick, Easy Characterization of Powder Materials with the Highest Accuracy

The BELSORP MAX G is a powerful, compact, and economical model in Microtrac's BELSORP MAX series of BET specific surface area and pore size analyzers. It allows the measurement of gas adsorption isotherms starting from extremely low pressures for the evaluation of micro-, meso- and macroporous materials, as well as non-porous materials.



The analyzer is equipped with one measurement port, one dedicated port for saturated vapor pressure measurement, and one port for free space (dead volume) analysis. Each port is equipped with a dedicated pressure sensor for high-precision analyses.

The BELSORP MAX G surface area & pore size distribution analyzer is capable of analyzing a wide range of materials, including pellets, molded bodies, substrates, and finely dispersed samples thanks to specially designed sample tubes.

The unit also supports a wide range of adsorbates and measurement conditions. The instrument is available in two different versions, making it suitable for a wide range of applications: BELSORP MAX G LP (Low Pressure) and BELSORP MAX G MP (Medium Pressure). Either version is equipped with a specific pressure transducer to best suit your needs.



Side view



Instrument detail



BELSORP MAX G in the laboratory

BELSORP MAX G

FAST AND PRECISE CHARACTERIZATION OF POROUS MATERIALS

- Porosity analysis from micropore to mesopore and macropore by gas adsorption measurement of N_2, Ar, CO_2 and more
- Low total surface area analysis with Kr at 77.4 K
- High-quality, reproducible BET specific surface area (SSA) and pore size distribution (PSD) evaluation from an adsorption isotherm, starting from extremely low pressure
- Gas and NET adsorption measurement via AFSM™2, without the need for He gas
- PSD elemzés QSDFT, NLDFT és GCMC segítségével a BELMaster szoftverrel
- Gas Dosing Optimization (GDO) dramatically boosts efficiency for data acquisition
- IoT: Process monitoring via e-mail notification system

Both BELSORP MAX G LP (Low Pressure) and BELSORP MAX G MP (Medium Pressure) are equipped with a turbomolecular pump (TMP), allowing pore size analysis from extremely low relative pressure. The individual configuration for these models is as follows:

	BELSORP MAX G LP	BELSORP MAX G MP
Port 1	1,000 Torr, +10 Torr, +0.1 Torr	1,000 Torr, +10 Torr, +1 Torr
Port 2	1,000 Torr	
Turbomolecular pump	yes	

BELSORP MAX G

FŐ JELLEMZŐK

ULTRA-LOW PRESSURE MEASUREMENT


The BELSORP MAX G allows for high-accuracy measurement of adsorption isotherms in a wide range, starting from the ultra-low pressure region ($P/P_0 = 10^{-8}$, N_2 @ 77 K) to atmospheric pressure. The BET surface area and pore size distribution analyzer includes a turbo molecular vacuum pump and low-voltage pressure transducer.

BELSORP MAX G

MEASUREMENT ACCURACY AND CONTROL

INNOVATIVE FREE SPACE MEASUREMENT FOR HIGHEST ACCURACY (AFSM™)

Strictly controlling the level of liquid coolants (e.g. liquid nitrogen or argon) is no longer required with the BELSORP MAX G. Instead, we have implemented our groundbreaking, continuous free space measurement method: the patented Advanced Free Space Measurement (AFSM™). This method achieves the highest level of reproducibility by using a reference cell to follow the second-to-second changes of free space.

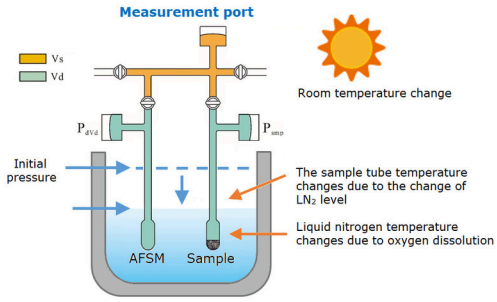

First, the instrument determines the free space of the sample cell and reference cell. Then, as the analysis proceeds any changes to the system that might alter the measured Free Space are concurrent in both cells. Therefore, alterations in the measured free space can be continuously accounted for through the reference cell.
Examples of causes for free space fluctuations include:

- Liquid nitrogen (LN_2) level changes
- Atmospheric temperature and pressure changes
- Coolant temperature changes due to dissolution of oxygen

With this superior technique, environmental factors can be taken into account that were not considered before. For more information, please visit our knowledge base.

EASE OF USE – SIMPLE SETTING OF MEASUREMENT CONDITIONS

The BELSORP MAX G has a fully automated system that enables the user to easily setup measurement conditions through ‘Simple Mode’. This mode makes sample analysis a breeze by only requiring minimal user entry (e.g., sample information, pretreatment conditions and measurement range). This is particularly useful for unknown materials and for the application of standard operation procedures. Detailed measurement configurations can be set by experienced users by selecting the ‘Professional Mode’.

GAS DOSING OPTIMIZATION (GDO)


The Gas Dosing Optimization (GDO) function calculates the optimal gas dosing amount from previous measurement results. This function can reduce measurement times significantly.

BELSORP MAX G

ANALYSIS AND PRETREATMENT

HELIUM-FREE MEASUREMENTS (AFSM™2)

By measuring the free space of a 'blank' sample tube in advance, measurements can be achieved without the need for helium gas. Using the same sample tube, in the same analysis conditions, the free space can be easily calculated using your sample's mass and density. This method also reduces sample analysis time by cutting out the free space determination at the beginning of every sample measurement. With AFSM™2, there is no need to match the liquid level of the coolant between the blank measurement and sample analysis.

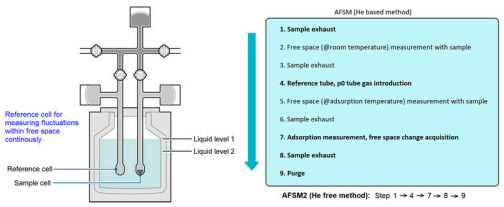


COMPACT & LIGHTWEIGHT

By optimizing the component materials, we have managed to provide a unit with a small footprint and low weight.

IN-SITU PRETREATMENT (OPTIONAL)

For an accurate adsorption measurement, a pretreatment of the samples is required. The pretreatment process (also called activation process) is usually performed by applying vacuum under heat, which removes adsorbed gas and / or water molecules from the surface of the material without affecting the sample structure (avoiding denaturation).

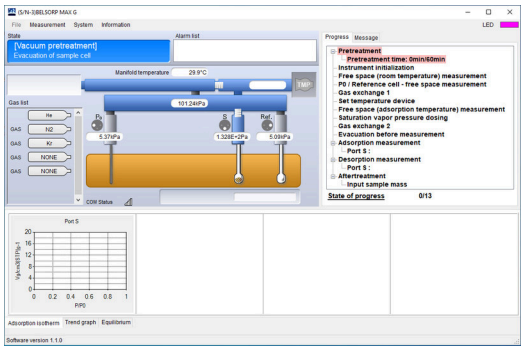

Microtrac offers two options for sample pretreatment. First, it can be performed externally using our BELPREP equipment, which is usually preferred to increase sample throughput. Alternatively, the activation process can be performed directly at the measurement port of the BELSORP MAX G using a heater (see accessories list). This way, a transfer from the external pretreatment device to the measuring port can be avoided, which is an important option for sensitive samples (e.g. hydrophilic material).

ADATANALÍZIS

BELMaster™ 7

BELSORP MAX G

TARTOZÉKOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK



STANDARD CONSUMABLE GOODS

Our standard consumables consist of sample cells, filler rods, filters, O-rings, caps and weighing platforms that are required for adsorption measurements. NSD capsules, a variety of sample cells, quick seals, and much more are part of the consumable goods.



WATER BATH

Easily swap the Dewar with a water bath for measurement temperatures ranging from -10°C to 80°C. A refrigerated / heated circulator is required.




HEATER

In-situ pretreatment of the sample from 50°C to 550°C. With this option, samples can be pretreated directly at the measurement port, without the need to transfer the sample cell before analysis. Particularly useful for sensitive samples.



GAS SELECTOR

The gas selector enables the connection of up to 4 adsorptives simultaneously (1 x Helium + 4 x adsorptive).

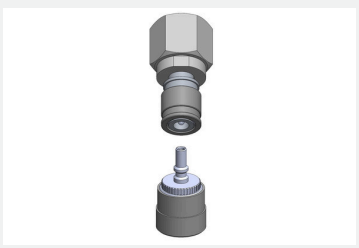

AIRGUARD MÉRÉSSÉGSZERRENDSZER

Az AirGuard mérőrendszer lehetővé teszi a pontos BET felületi terület és pórhossz-elosztás elemzését a BELSORP mérőeszközökön, miközben védi a érzékeny mintákat a nedvesség és az oxigén hatására. Ez különösen fontos a funkcionális anyagok esetében, amelyek levegővel reagálhatnak, és potenciálisan megváltoztathatják szerkezetüket vagy korróziós gázokat termelhetnek.

Egyszerű, egy-nyomásos telepítéskel az AirGuard biztosítja a magas pontosságú méréseket anélkül, hogy növelné az elemzési időt. Ez egy megfizethető frissítés, amelyet meglévő BELSORP rendszerekhez is retrofitálhatnak, lehetővé téve megbízható, szennyeződésmentes elemzést.

OPCIONÁLIS KRIOGÉN HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS

BELCRYO X

Növelje az adsorpciós méréseit a BELCRYO X segítségével, egy precíziósan szabályozott kriostatisztéma, amelyet a BELSORP sorozathoz való tökéletes integrációra terveztek.

Hőmérsékletkontrollal 50 K-tól 473 K-ig (-223°C-tól 200°C-ig) terjedve, a BELCRYO X lehetővé teszi rendkívül stabil és ismétlhető méréseket széles körű kísérleti körülmények között – folyékony nitrogén nélkül. Ez ideális a fejlett kutatásokhoz, mint például a BET felületalapú elemzés, a pórhossz-elosztás, a gázraktározás és a gázválasztás kutatása.



A BELSORP MAX X / MAX G-vel kombinálva a BELCRYO X lehetővé teszi:

- Pontos adsorpciós izotermák mérése több hőmérsékleten
- Megbízható adsorpciós izostéri hőmérséklet értékelését
- Kiterjesztett képességeket a kriogén gázraktározási és választási tanulmányokhoz
- Teljesen szoftvervezérelt és automatizált működést a BELControl szoftverrel

FEDEZZE FEL A BELCRYO X-ET → MICROTRAC.COM/HU/TERMEKEK/GAS-ADSORPTION-MEASUREMENT/SURFACE-AREA-PORE-SIZE-DISTRIBUTION/BELCRYO-X/

BELSORP MAX G

BELCONTROL: NEW OPERATION SOFTWARE

The versatility of BELSORP equipment is truly world leading. The numerous features and capabilities are complemented by BELCONTROL the intuitive and user-friendly operation software. It guides the user step-by-step through the analysis process. This includes the setup of analysis conditions, executing the measurements, when to fill and setup the liquid nitrogen or other bath, when to replace the gas cylinder, the degassing steps, and much more. The software is designed to make the instrument accessible and operable to everyone, including inexperienced users.

For inexperienced users or for measurements of unknown samples, BELCONTROL only requires basic sample information (name, mass, etc.), pre-treatment conditions (if not performed externally) and the measurement range.

BELSORP MAX G

OPERATION SOFTWARE


Detailed control of the configuration and measurement settings is possible to optimize the measurement conditions (e.g. dosing settings, equilibrium criteria, leak test option, etc.). This allows the user to fully customize the sample analysis to his needs.

	BELCONTROL	
Quick BET	igen	Multi-point BET surface area in less than 20 minutes
Helium-Free Measurement	igen	AFSM™ 2 enables He-free measurements with unmatched accuracy
Adsorption Kinetics	opcionális	Rate of adsorption measurements for diffusion analysis

MORE BELCONTROL FEATURES

- Overlaying adsorption / desorption isotherms and comparing the measured data between the various ports during measurement
- All pressures, temperatures, valve actuations, etc. are stored in trend data, allowing for immediate examination
- A system check function is available for diagnosing the instrument status
- E-mail notification automatically transmits measurement status and results
- Interactive program in Japanese or English ensures easy, reliable operation
- Extensive help functions, including step-by-step instructions during operation

Two measurement modes are offered: ‘Simple Mode’ and ‘Professional Mode’. Simple Mode enables easy operation, requiring minimal setup. You only need to enter the basic sample information (name, mass, etc.) and then select your pretreatment conditions and analysis conditions from a list of preset options. This is ideal for inexperienced users or measurements of unknown samples. If a prior measurement with comparable sorption behavior has been performed, GDO can be used to reduce the measurement time.

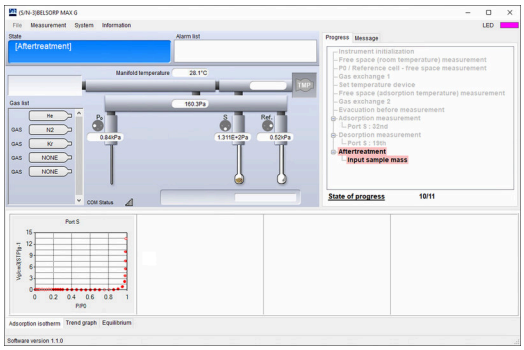


Professional Mode allows detailed control of the configuration and measurement settings (e.g., dosing settings, equilibrium criteria, leak-check option, etc.), allowing the user to completely customize sample analysis.


GAS ADSORPTION MEASUREMENTS OF POROUS & NON-POROUS MATERIALS

EVALUATION SOFTWARE BELMASTER

A sorption isotherm is defined as the relationship between the adsorbed amount onto an adsorbent and the equilibrium pressure of the adsorptive gas – commonly related to the saturation vapor pressure – at constant temperature. The gas sorption isotherm (e.g. nitrogen) delivers information about the specific surface area, pore size distribution and pore volume of measured material. In the following graph some exemplary sorption isotherms are shown.

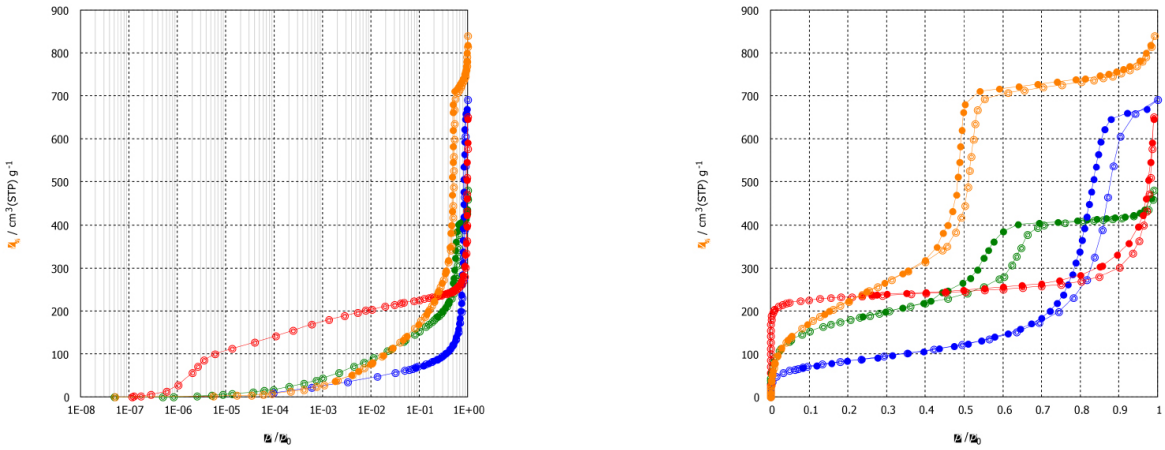

The specific surface area (SSA) refers to the accessible surface area of the sample and is of great importance in adsorption, homogeneous and heterogeneous catalytic reactions. The specific surface area can be calculated according to ISO 9277 with the BET method (BET: Brunauer, Emmett and Teller) or Langmuir method. The following graph shows an exemplary evaluation of the specific surface area according to the BET method in our BELMASTER software:

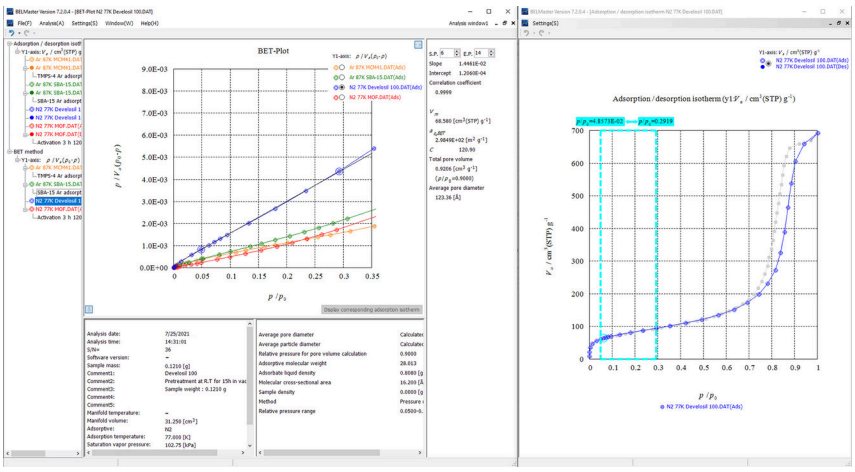


Select the right pressure range (multi point BET) or a measurement point (single point BET) and the surface area will be calculated automatically. Further, our BELMASTER software also provides the BET surface area calculation according to ISO 9277 Annex C (also known as Rouquerol-plot), which is recommended for microporous materials.

BELSORP MAX G

SURFACE AREA AND PORE SIZE EVALUATION


The outstanding feature of the BELSORP MAX G is the availability of three different transducers (1000, 10 and 1 / 0.1 torr), enabling very low pressure adsorption isotherms, starting from $p/p_0 = 10^{-8}$ (N_2 @ 77K) up to atmospheric pressure. As a result, pore size distributions from 0.35 up to 500 nm can be obtained. Further, low surface area measurements down to 0.0005 m^2/g by using krypton gas are possible.

The characterization of low specific surface area materials such as non-porous metallic materials, glass substrates, and films can be difficult or impossible with traditional gases like nitrogen (77 K) and argon (77 K or 87 K) due to detection limits. Instead, krypton gas adsorption can be used at liquid nitrogen temperature to determine the BET specific surface area down to 0.0005 m^2/g.

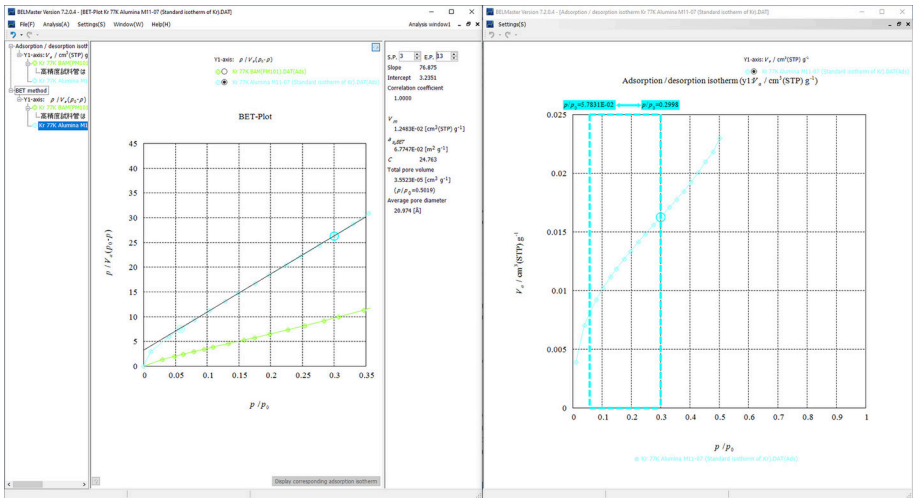

A Microtrac fejlett QSDFT, NLDFT és GCMC módszerekkel nyújt következő generációs pórhossz-elosztás elemzést, megszüntetve a hagyományos megközelítések korlátait, széles pórhossztartományon, 0,35 nm-től 500 nm-ig egységes, nagy pontosságú karakterizációval. A BELSORP sorozatkal kombinálva pontos adsorptív izotermák mérése érdekében, ez a megoldás biztosítja a pórszerkezetek megbízható és hatékony értékelését. A BELMaster rendelkezik 59 kiterjedt magassyűrtékkel gázok számára, mint például N_2, Ar és CO_2, lehetővé téve a célzott elemzést a anyagfelület tulajdonságainak és a pórhossz alakjainak figyelembevételével a specifikus anyagfajták (zeolitok, mesopórus silica, aktivált szén és más) esetében.

GAS DOSING OPTIMIZATION

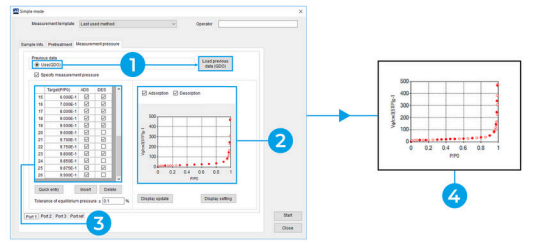

1. Load an existing isotherm | 2. Display of expected isotherm | 3. Input of measurement range | 4. Automatic optimization of conditions such as gas introduction volume


BELSORP MAX G

TIPIKUS ALKALMAZÁSOK

Microtrac's gas adsorption analyzers are used in a variety of fields.

These include catalysts, batteries, fibers, polymer materials, zeolite, fuel cells, chemicals, pigments, cosmetics, MOF / PCP, magnetic powders, separation membranes, filters, toners, cement, ceramics, semi-conductors, and many more.



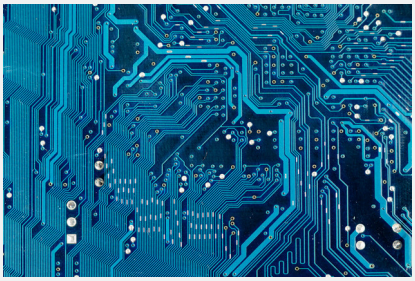



- akkumulátor anyagok
- katalizátorok
- zeolit
- kerámia
- szén
- elektronikus alkatrészek
- Üzemanyagcellák
- toner
- cement
- gyógyászat / gyógyszergyártás
- Szilika
- MOF / PCP
- pigmentek
- kozmetikumok
- ... és még sok minden más!

Látogassa meg Alkalmazási adatbankunkat a szemcseanalízis legjobb megoldása érdekében!

ALKALMAZÁSI ADATBANK → MICROTRAC.COM/HU/ALKALMAZASOK/ALKALMAZASI-ADATBANK/

BELSORP MAX G

MŰSZAKI ADATOK

Mérési elv	volumetrikus módszer + AFSM™
Adszorpciós gáz	N_2, Ar, Kr, CO_2, H_2, O_2, CH_4, NO, CO, bután és különféle egyéb (nem)korrozív gázok
Gázbevezetések száma	2 port (opció: max. 5)
Egyidejű mérőhelyek száma ("High Accuracy" üzemmód)	1 port "High Accuracy" üzemmódban
Méréstartomány (fajlagos felület)	min. 0,01 m_2/g (N_2) min. 0,0005 m_2/g (Kr) (minta sűrűségétől függően)
Pórusméret-eloszlás (átmérő)	0,35 - 500 nm
Alacsony nyomású izoterma	p/p0 = 10^{-8} (N_2 @77K, Ar @87K)
Nyomás jeladó	133 kPa (1000 Torr) x 3 units 1.33 kPa (10 Torr) x 1 unit 0.133 kPa (MP) or 0.0133 kPa (LP) x 1 unit
Vákuummérő/szivattyú	turbomolekuláris + rotációs vákuumszivattyú opció: hidegkatódos vákuummérő
Mintacső	standard mintacső, kb. 1,8 cm3 (opció: 5 cm3)
Dewar edény	térfogat: 2,6 l üzemidő: 80 h
Melegítéses előkezelés	50 - 450 °C
Vízfürdő	-10 - 80 °C
BELMaster™ 7 mérési szoftver	Adsorption isotherm, BET specific surface area I type (ISO9277), BET automatic analysis, Langmuir specific surface area, BJH, DH, CI, INNES method, t-plot, Alpha-s plot
BELMaster™ 7 mérési szoftver (folyt.)	HK, SF, CY módszer, QSDFT / NLDFT / GCMC, MP módszer, Dubinin-Astakhov módszer, Különbség adsorptíziós izotérma, Molekuláris sonda, Adsorbciós sebesség elemzése (opcionális)

BELSORP MAX G

MŰSZAKI ADATOK — FOLYTATÁS

Méretek (szél x mag x mély)	320 x 740 x 465 mm
Közműigény - gáz	He, adszorpciós gáz: 0,1 MPa (G), tisztaság: jobb mint 99,999% csatlakozás: 1/8" Swagelok
Közműigény - elektromos hálózat	alapkészülék: AC 100 - 240 V / 850 W, 50 / 60 Hz (vákuumszivattyúval együtt)
ASTM compliance	B922, C110, C1069, C1240, C1274, D1993, D3663-20, D3908, D4222, D4365, D4641, D4780, D4842, D5604-96, D6556, D8325, E2864, WK61828, WK71859
USP compliance	268, 846
DIN compliance	66134 (1998-02), 66135-1 (2001-06), 66135-2 (2001-06), 66135-3 (2001-06), 66135-4 (2004-09)
CE tanúsítvánnyal	igen
Recommended Monitor	Full HD monitors

BELSORP MAX G

LETÖLTÉSEK

Termék adatlap BELSORP MAX G:

TERMÉK ADATLAP BELSORP MAX G (MAGYAR) →
microtrac.com/files/452721/termek-adatlap-belsorp-max-g.pdf

BELSORP MAX G (ANGOL) →
microtrac.com/files/421872/belsorp-max-g.pdf



BELSORP MAX G

KAPCSOLATFELVÉTEL

microtrac.com/hu/contact-services/general-request/?prefilltext=contact_form.request&product=622

AJÁNLATKÉRÉS

microtrac.com/hu/contact-services/quote-request-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=622



MICROTRAC
a VERDER company

microtrac.com/hu/termekek/gas-adsorption-measurement/surface-area-pore-size-distribution/belsorp-max-g/

© Microtrac – microtrac.com / Content may be subject to modifications or corrections