



ANALYSEUR DE TAILLE ET DE FORME DE PARTICULES

CAMSIZER XL


microtrac.com/fr/produits/analyse-taille-forme-particules/analyse-dynamique-des-images/camsizer-xl/

CAMSIZER XL

ANALYSEUR DE TAILLE ET DE FORME DE PARTICULES

Le CAMSIZER XL de Microtrac est un analyseur de particules pour la caractérisation de la forme et de la taille de macroparticules, capable d'effectuer des mesures granulométriques sur une plage allant de 160 à 135 000 μm .

- | Caractérise 40 paramètres morphologiques, y compris en 3D
- | Mesure sans contact de particules sèches d'une taille de 160 μm à 135 mm
- | Alimentation en échantillon adaptable
- | Analyse plus de 100 images par seconde à l'aide d'une caméra rapide à haute résolution
- | Le système optique fermé garantit un entretien minime

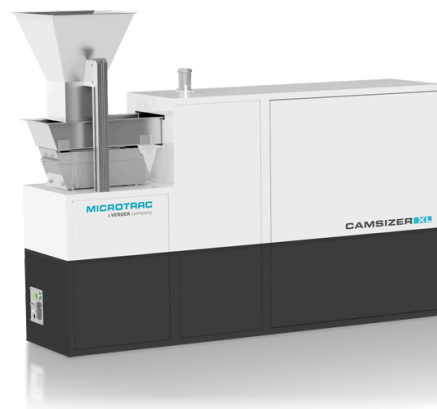

CAMSIZER XL

CARACTÉRISTIQUES

- | Du fait de son aptitude à mesurer en une seule analyse 40 paramètres parmi lesquels 15 paramètres de taille, 13 morphologiques, 3 de rugosité surfacique, mais aussi la tension de surface, la transparence et en 3D, le CAMSIZER XL offre à ses utilisateurs une excellente analyse favorable à une prise de décision rapide et perspicace quant à la qualité du produit.
- | La plage de mesure généreuse offre à l'utilisateur une grande flexibilité et donc la possibilité de mesurer une grande variété de matériaux.
- | La caméra rapide à haute résolution garantit la capture de plusieurs images claires de la matière échantillon à des fins d'analyse précise.
- | Conçu pour être mis à rude épreuve et résister à des conditions extrêmes, le CAMSIZER XL s'adapte à n'importe quel environnement de laboratoire.
- | Le mécanisme d'auto-nettoyage évite à l'utilisateur de perdre son temps à nettoyer l'appareil et augmente ainsi sa productivité.


CAMSIZER XL

APPLICATIONS TYPIQUES

Utilisé dans divers domaines tels que: Agrégats , Matériaux de construction, Engrais, aliments, géologie / industrie minière , Perles de verre, ...



ciment

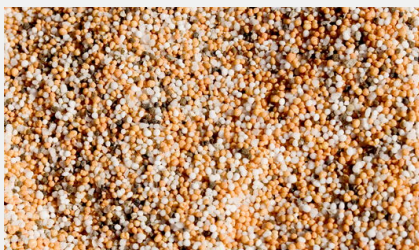

Engrais



Copeaux de bois

Pour trouver la meilleure solution à vos besoins de caractérisation des particules, visitez notre base de données d'applications.

BASE DE DONNÉES D'APPLICATIONS → microtrac.com/fr/applications/base-de-donnees-applications/

CAMSIZER XL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Principe de mesure	Analyse d'images dynamiques (ISO 13322-2 & 9276-6)
Plage de mesure	160 µm à 135 mm
Paramètres de mesure	La mesure 3D brevetée est conforme à la norme ISO 13322-2
Cadence de mesure	> 100 images/s
Facteur d'échelle (µm / pixel)	160 µm / pixels
Format de la caméra	2560 x 2048 pixels, 62 images/s en résolution maximale
Source lumineuse	Lumière stroboscopique
Alimentation électrique	110-230 V / 50-60 Hz
Consommation	env. < 100 watts
Quantité d'échantillon	> 2 kg (suivant l'application)
Temps de mesure	Env. 1 à 5 minutes (suivant l'application)
Spécifications physiques	Aluminium et acier inoxydable
Dimensions (L x H x P)	400 x 1229 x 1693 mm
Poids	Env. 70 kg

CAMSIZE XL

NOUS CONTACTER →

microtrac.com/fr/contact-services/general-request/?prefilltext=contact_form.request&product=702

DEMANDE DE DEVIS →

microtrac.com/fr/contact-services/quote-request-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=702

FICHE PRODUIT CAMSIZE XL →

microtrac.com/files/469207/fiche-produit-camsizer-xl.pdf

CAMSIZE SERIES →

microtrac.com/files/470453/camsizer-series.pdf



MICROTRAC
a **VERDER** company

microtrac.com/fr/produits/analyse-taille-forme-particules/analyse-dynamique-des-images/camsizer-xl/

© Microtrac – microtrac.com / Content may be subject to modifications or corrections